

# BETACLAV - sterilizuje materiály pevné, duté a pórovité, zabalené i nezabalené

## Sterilizátor triedy B


uvádzacia cena:  
**129 000,- Sk**  
(vrátane DPH)

- ◆ Dvojiročná záruka na celý sterilizátor a desaťročná na sterilizačnú komoru.
- ◆ Servis na telefonické zavolanie do ôsmich hodín.
- ◆ Široká ponuka dodatkového príslušenstva.
- ◆ Individuálny platobný kalendár podľa dohody.

### Optimálna veľkosť - minimálna cena.



**DIDAKTIK**

  
Spĺňa normy EÚ

# BETACLAV

**má všetko, čo  
je potrebné  
na účinnú  
sterilizáciu !**



- ◆ **Dvojiročná záruka na celý sterilizátor a desaťročná na sterilizačnú komoru.**
- ◆ **Servis na telefonické zavolanie do ôsmich hodín.**
- ◆ **Široká ponuka dodatkového príslušenstva.**
- ◆ **Individuálny platobný kalendár podľa dohody.**

## Technické údaje:

Objem sterilizačnej komory: 12 litrov.  
Celková hmotnosť: 36 kg.  
Rozmery: 400 x 350 x 540 mm  
Príkon: 1,5 kW  
Spotreba: menej ako 1 kWh / cyklus  
Spotreba vody: menej ako 0,5 l / cyklus  
Bakteriologický filter: Cominox 0,2 µm  
Výstup na externú tlačiareň


Výrobca: **DIDAKTIK**

Pod Kalváriou 22  
909 01 Skalica  
Tel.: 034/6644936  
mail: klemon@didaktik.sk


Dodávateľ: **FANG - Dent** s.r.o.

Pod Kalváriou 1278  
955 01 Topoľčany  
Tel.: 038/5321429, 5223004  
Fax: 038/5323090  
Mobil: 0903/496759  
<http://www.fang.sk>  
e-mail: dental@fang.sk

## Funkčná schéma sterilizátora

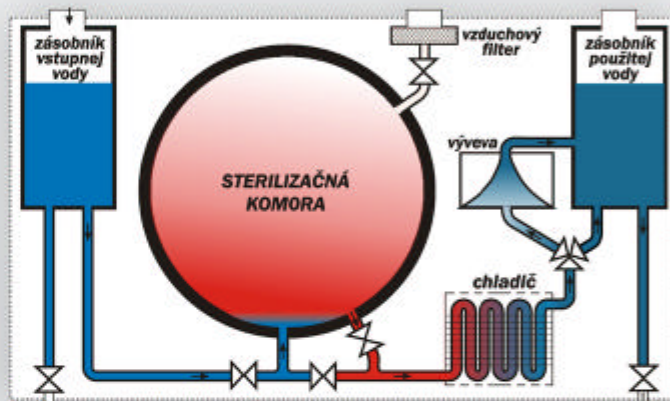

## Graf časového priebehu sterilizačného cyklu

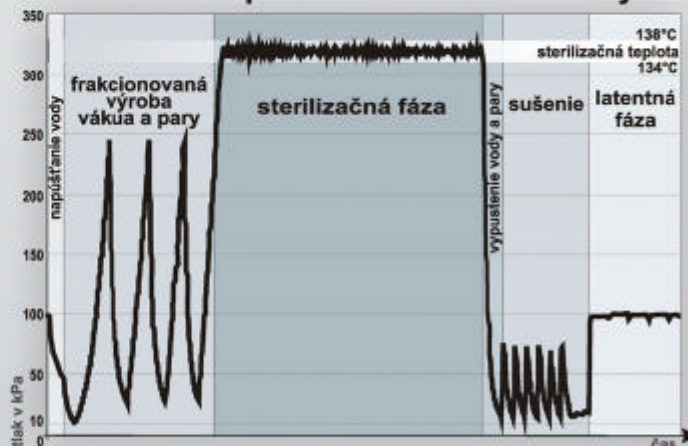

## Programové vybavenie :

Názov cyklu	Sterilizačné parametre		expozícia v min.	sušenie v min.	Celkový čas v min.
	teplota (v °C)	abs.tlak (v kPa)			
121 Normal	121 (+4)	210	20	20	77
134 Normal	134 (+4)	310	10	20	67
134 Flash	134 (+4)	310	7	2	34
134 Prion	134 (+4)	310	60	20	117
B-D/Helix test	134 (+4)	310	3	4	44
Vákuový test			15		21